




Výrobky Attends byly testovány a schváleny z hlediska vlivu na zdraví pokožky Institutem pro aplikovaný dermatologický výzkum proDERM v německém Hamburku.



Lidé, kteří potřebují výrobky pro potíže s inkontinencí, je často používají 24 hodin denně. To znamená, že pokožka je neustále ve styku s povrchem výrobku. Proto je tak důležité vybírat materiály, které jsou k pokožce šetrné. Ještě důležitější však je, že pokud inkontinenční pomůcky zanechávají pokožku vlhkou, může dojít k podráždění nebo dokonce poškození pokožky – to může být pro uživatele velmi bolestivé a pro pečovatele se tak potenciálně prodražuje poskytovaná péče.


Institut proDERM testoval výrobky Attends určené pro inkontinentní osoby z hlediska jejich dermatologické tolerance a působení na zdraví pokožky následujícími třemi způsoby:

1. Suchý test

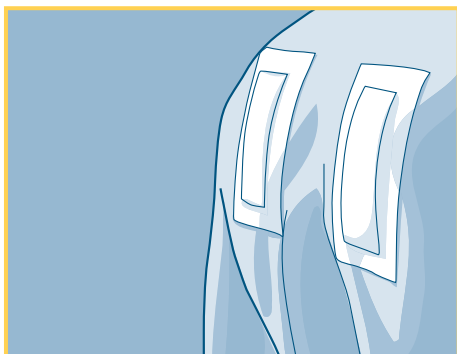

Na záda subjektu se přiloží malé části (suchého výrobku nebo materiálů, které jsou ve styku s pokožkou) po dobu 3 x 24 hodin; denně se provádí vizuální dermatologické hodnocení jakékoli reakce pokožky, které institut proDERM zaznamenává dle dané stupnice.

2. Mokrý test

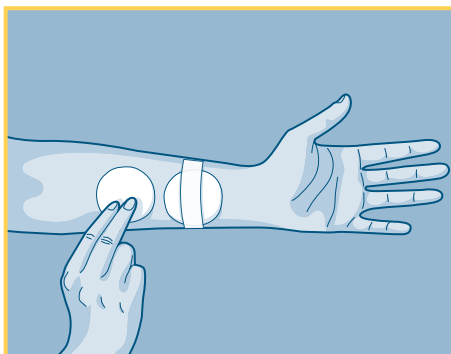

Na pokožku se přiloží část mokrého výrobku Attends napuštěná syntetickou močí po dobu 3 x 24 hodin. Institut proDERM vizuálně hodnotí a známkuje působení na pokožku a zároveň provádí tzv. měření TEWL*. Vlhkost výrobku odpovídá výsledkům testu průsaku**, který používáme k měření účinnosti našich výrobků a k simulování reality.

3. Hodnocení v praxi



Čtyřtýdenního testování se zúčastnilo více než 200 uživatelů výrobků Attends v institucionální péči. Zdravotnický personál sledoval působení na pokožku, prováděl vizuální hodnocení a také známkování pomocí celosvětově uznávaného nástroje pro hodnocení stavu pokožky.

Ne všechny výrobky musí podstoupit tyto tři zkoušky – některé výrobky mají identické materiály a technologii zpracování jádra, a jeden výsledek testu proto může být použit pro více výrobků. Každý samostatný materiál ale vždy podstupuje alespoň Suchý test.

* Transepidermální ztráta vody (Transepidermal Water Loss): nástroj, který měří ztrátu vláh v pokožce, což je znamení zhoršení jejího zdraví.

** Zkoušky průsaku měří množství tekutiny, která se (pod tlakem) vrátí na povrch pomůcky poté, co pomůcka přijala proud tekutiny. Více informací viz brožura „Sortiment inkontinenčních pomůcek Attends“.

Závěr

Technologie použitá pro jádro inkontinenčních výrobků Attends zajišťuje pro uživatele výbornou ochranu před protečením a suchou pokožku. Výsledky zkoušek institutu proDERM (Suché a mokré testy, Hodnocení v praxi) ukazují, že výrobky Attends jsou přátelské k pokožce a v souvislosti se zdravím pokožky si vedou velmi dobře.

Proto institut proDERM udělil inkontinenčním pomůckám Attends Pečeť kvality*



* Testované/schválené výrobky: Slip Regular, Slip Active, Flex, Pull-Ons, Contours, Soft a Cover-Dri.

Pečeť si musíme zasloužit každý den...

Každý den opouští továrnu Attends ve švédském městě Aneby 25 plných kamionů, aby dodaly naše výrobky zákazníkům po celé Evropě. Abychom si udrželi naše vysoké standardy kvality, zabýváme se každou reklamací na náš výrobek, která se k nám od uživatelů vrátí. Jsme smluvně zavázáni sdílet s institutem proDERM veškeré reklamace týkající se zdraví pokožky uživatelů našich výrobků – mezi firmou Attends a institutem proDERM tím pádem existuje naprostá transparentnost. Pokud by bylo zaznamenáno zvýšení počtu reklamací v souvislosti se zdravím pokožky u konkrétní skupiny výrobků, institut proDERM očekává pečlivé prošetření a nápravu problému.

Jsme pyšní, že od počátku smluvní spolupráce mezi společností Attends a institutem proDERM (červen 2010) nebylo třeba provádět žádná nápravná opatření.

Reference:

- proDERM, Institut pro aplikovaný dermatologický výzkum
Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld / Hamburg, Německo.
www.proderm.de
- Čísla studií proDERM: 09.0363-99, 10.0240-99, 10.0239-06, 11.0427-02. ~~Říjen 2009 – prosinec 2011.~~
- Záznamy o hodnocení v praxi pro Attends Healthcare, ~~srpen 2010 a únor 2012~~

Veškerá dokumentace (záznamy, certifikáty, protokoly, výsledky testovacích studií atd.) jsou dostupné na vyžádání.
Datum poslední revize: ~~Říjen 2013~~